



MERCATOR lateks

Naslednja navodila je treba uporabljati skupaj s podrobnimi informacijami na embalaži.

Kratek opis izdelka

Zaščitne rokavice iz lateksa, pudrane, nesterilne, za enkratno uporabo, minimalna nevarnost

Celoten opis izdelka

Referenčna številka:	:RP11001001-05
Surovina	: lateks
Manšeta	: zvit
barva	: krema
oblika	: obojestranski, se prilaga obema rokama
Velikosti	: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10): 100
Embalaža v razsutem stanju	: kosov glede na težo
Rok veljavnosti	: 5 let (od datuma proizvodnje)

Navodila za shranjevanje

Priporočljivo je, da rokavico hranite na suhem mestu, pri temperaturi 5-35°C in jo zaščitite pred sončno svetlobo in fluorescenčno svetlobo.

Rokavice je treba zaščititi pred vlago.

Rokavice imejte na razdalji najmanj 1 m od grelnih naprav, virov ognja in ozona.

Ne shranjujte v neposredni bližini topil, olj, goriv ali masti.

Stik s hrano

Rokavice, označene s piktogramom, ki označuje odobritev stika

z živili, v skladu z Uredbo (ES) št. 10/2011, Uredbo (ES) št. 1935/2004 in Uredbo (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi. Rokavice, primerne za stik z vsemi vrstami hrane, razen kisle hrane, testirane v skladu z EN 1186 Global Migration Test:

Vozni pogoji ekstrakcija (40°C 30 min.)	Rezultati analize [mg/dm ²]	Rezultat testa (mejna vrednost < 10 mg/dm ²)
10% etanol	5.0	Izpolnjuje

Klasifikacija osebne zaščitne opreme in skladnost s standardi

Rokavice, razvrščene kot osebna zaščitna oprema – kategorija I za minimalno tveganje, v skladu z Uredbo 2016/425.

Skladnost s standardi: EN 420:2003+A1:2009.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: https://mercatormedical.eu/produkty/rekawice/gospodarcze_i_ochronne/mercator-latex



Aplikacija

Nesterilne zaščitne rokavice, namenjene higijenskim in sanitarnim delom na javnih mestih, vzdrževanju čistoče v objektih, pomožnih prostorih in domovih, profesionalnih čistilnih storitvah s čistilnimi sredstvi s šibkim delovanjem in lahko reverzibilnimi učinki, vrtnarstvu, poljedelstvu, predelavi hrane.

in za stik s hrano, za uporabo v mehanskih obratih z nevarnostjo le površinskih poškodb zaradi mehanskih udarcev in za gospodinjstva dela. Razvrščen kot osebna zaščitna oprema kategorije I za minimalno tveganje. Njihov dizajn in označevanje izpolnjujeta zahteve Uredbe 2016/425 o osebni zaščitni opremi. Rokavice uporabljajte samo za predvideni namen.

Indikacije za uporabo

Preden si nadenete rokavice, je priporočljivo temeljito posušiti kožo rok. Pred uporabo rokavic preverite morebitne pomanjkljivosti. Če med uporabo pride do vboda, razpoke ali raztrganine, takoj zamenjajte rokavice. Izogibajte se rokavicam, ki so umazane od znotraj - lahko povzročijo draženje, ki povzroči dermatitis ali resnejše poškodbe. Rokavic ne smete uporabljati v stiku z odprtim ognjem ali za zaščito pred kakršnim koli ostrim orodjem. Rokavice niso namenjene varjenju, zaščiti pred električnim udarom, ionizirajočim sevanjem ali izpostavljenosti hladnim in vročim predmetom.

Nevarne sestavine/sestavine

Nekatere rokavice lahko vsebujejo sestavine, ki lahko povzročijo alergije pri ljudeh, ki so alergični nanje, in lahko doživijo draženje in/ali alergijske reakcije. Rokavice iz naravnega lateksa lahko povzročijo alergijske reakcije, vključno z anafilaktičnimi reakcijami. Če se pojavi alergijska reakcija, takoj poiščite zdravniško pomoč.










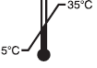



















Uporaba

Uporabljene rokavice je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Proizvajalec

MERCATOR MEDICAL SA
ulica H. Modrzejewska 30
31-327 Kraków, Poljska
www.mercatormedical.eu

Piktogrami, ki se lahko pojavijo na embalaži

	izdelek je artikel medicinski		izdelek je sredstvo osebna zaščita		označevanje napudranih rokavic
	izdelek za enkratno uporabo		zaščititi pred vlago		označevanje rokavic brez pudra
	nesterilen izdelek		zaščitite pred svetlobo sončno		označevanje rokavic, prekritih z notranjo polimerno plastjo
	poslana paketna koda s strani proizvajalca		trgovina pri temperaturi 5-35°C		označevanje rokavic z notranjim slojem kozmetiko in nego
	kataloško številko, ki jo dodeli proizvajalec		ščiti pred ozonom		označevanje rokavic z zunanjo teksturo
	pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti morata simbol spremljati ime in naslov pooblaščenega zastopnika		datum proizvodnje		rokavice iz nitrila
	Datum veljavnosti		Proizvajalec, simbol mora spremljati ime in naslov proizvajalca		rokavice iz vinila
	zaščita pred mikroorganizmi		primerne rokavice za stik s hrano		rokavice iz naravnega lateksa
	zaščita pred mikroorganizmi in virusi		za recikliranje		določitev števila kosov glede na uteži
	kemično odporne rokavice tipa A (šest testiranih kemikalij mora biti označeno s črko pod piktogram)		embalažo lahko obravnavamo kot komunalni odpadke		določitev števila kosov glede na uteži
	kemično odporne rokavice tipa B (tri testirane kemikalije naj bodo označene s črko pod piktogramom)		glejte navodila za uporabo		določitev števila kosov glede na uteži
	kemično odporne rokavice tipa C		Dodatne informacije navznoter pakiranje		kakovost rokavic ni zagotovljena v primeru poškodbe embalaže
	znak skladnosti z zahtevami ruskega trga		znak skladnosti z zahtevami ukrajinskega trga		

